





[®] *Dentag*



Scalpelli graduati
Graduated chisels
Ciseaux gradués
Cinceles graduados

Scalpelli Freer
Freer chisels
Ciseaux Freer
Cinceles Freer


29
2

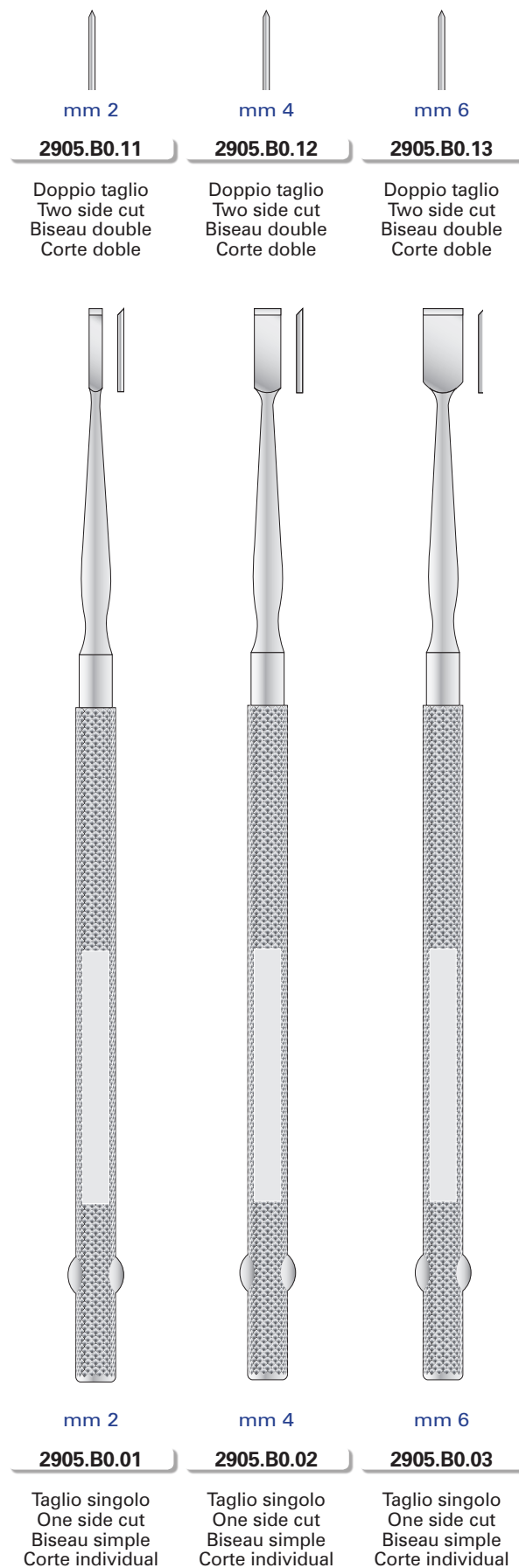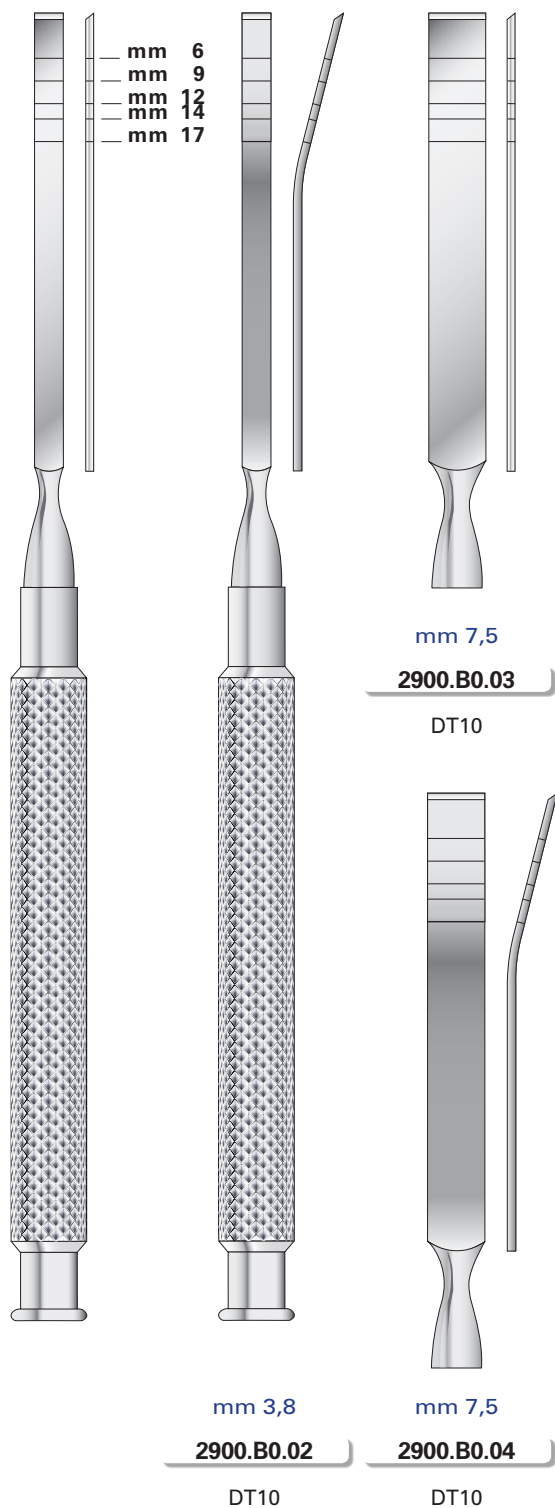



Implantologia
Implantology
Implantologie
Implantologia

Osteotomi
Osteotomes
Ostéotomes
Osteotomos

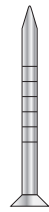

mm 2
2910.B0.01




mm 4
2910.B0.12




mm 2,8
2911.B0.02


29
3

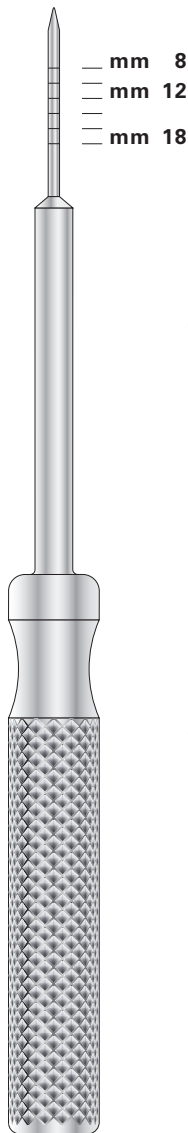


mm 1,5
2910.B0.015

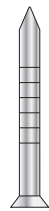


mm 2,7
2910.B0.02

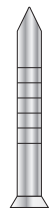

mm 3,25
2910.B0.03

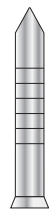


mm 3,8
2910.B0.04

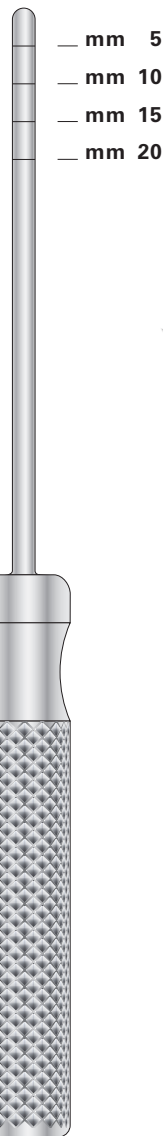

mm 3
2910.B0.11



mm 5
2910.B0.13

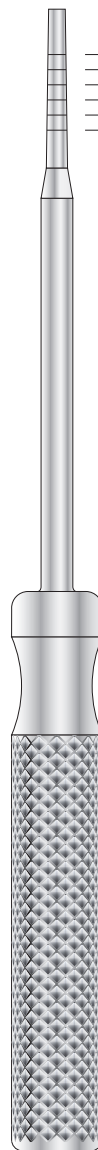

mm 2,2
2911.B0.01



mm 3,5
2911.B0.03

mm 6
mm 10
mm 16

Osteotomi
progressivi

Progressive
osteotomes

Ostéotomes
progressifs

29 Osteotomos
progressivos

4

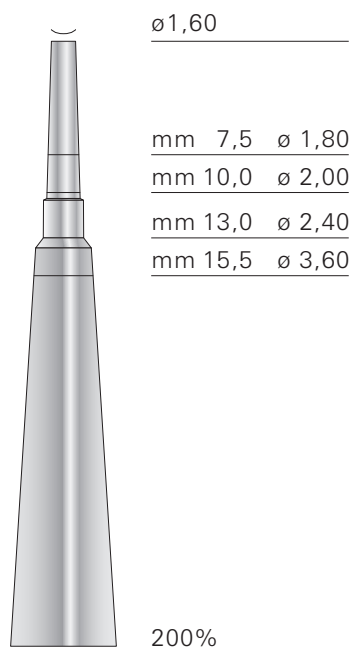


fig. 1

2920.B0.01

$\varnothing 1,60$		
mm	7,5	$\varnothing 1,80$
mm	10,0	$\varnothing 2,00$
mm	13,0	$\varnothing 2,40$
mm	15,5	$\varnothing 3,60$

200%

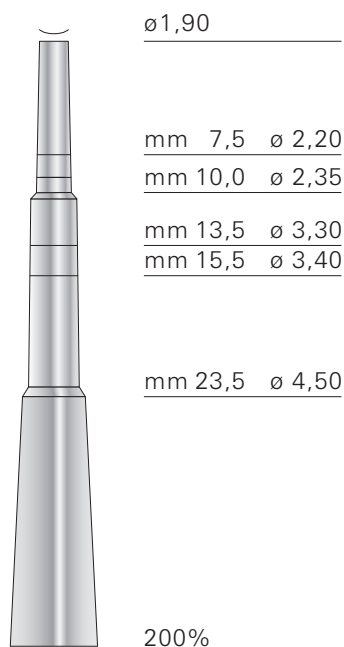


fig. 2

2920.B0.02

$\varnothing 1,90$		
mm	7,5	$\varnothing 2,20$
mm	10,0	$\varnothing 2,35$
mm	13,5	$\varnothing 3,30$
mm	15,5	$\varnothing 3,40$

mm 23,5 $\varnothing 4,50$

200%

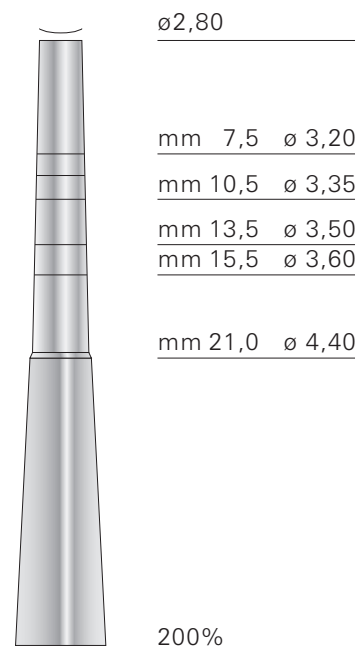


fig. 3

2920.B0.03

$\varnothing 2,80$		
mm	7,5	$\varnothing 3,20$
mm	10,5	$\varnothing 3,35$
mm	13,5	$\varnothing 3,50$
mm	15,5	$\varnothing 3,60$

mm 21,0 $\varnothing 4,40$

200%



fig. 4

2920.B0.04

$\varnothing 3,10$		
mm	7,5	$\varnothing 3,70$
mm	10,5	$\varnothing 3,90$
mm	15,5	$\varnothing 4,30$

200%

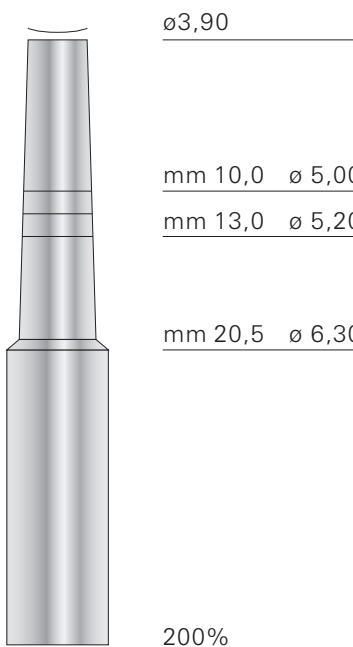


fig. 5

2920.B0.05

$\varnothing 3,90$		
mm	10,0	$\varnothing 5,00$
mm	13,0	$\varnothing 5,20$
mm	20,5	$\varnothing 6,30$

200%

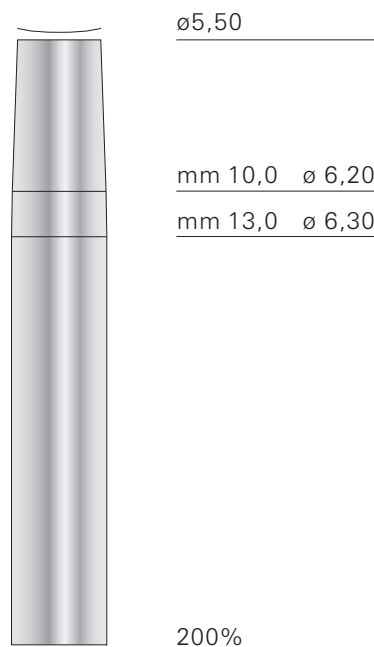


fig. 6

2920.B0.06

$\varnothing 5,50$		
mm	10,0	$\varnothing 6,20$
mm	13,0	$\varnothing 6,30$

200%

Osteotomi
con stop

Osteotomes
with stop

Ostéotomes
avec butée

Osteotomos
con stop

29
5




— mm 6
— mm 11
— mm 15

mm 2

2930.B0.01

mm 3

2930.B0.02

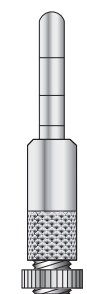


mm 3,3

2930.B0.03



mm 4

2930.B0.04

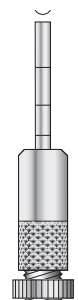

mm 2

2935.B0.01



mm 3

2935.B0.02



mm 3,3

2935.B0.03



mm 4

2935.B0.04



— mm 6
— mm 11
— mm 15

mm 2

2930.B0.11

mm 3

2930.B0.12



mm 3,3

2930.B0.13



mm 4

2930.B0.14



mm 2

2935.B0.11



mm 3

2935.B0.12



mm 3,3

2935.B0.13



mm 4

2935.B0.14



Dentag

Osteotomi
Osteotomes
Ostéotomes
Osteotomos

29
6



mm 2

2939.B0.01



mm 2

2939.B0.11



mm 3,3

2936.B0.02



mm 4

2936.B0.03



— mm 6
— mm 11
— mm 15



mm 3

2939.B0.02



— mm 6
— mm 11
— mm 15



mm 3

2939.B0.12



mm 3

2936.B0.11



mm 3,3

2939.B0.03



mm 3,3

2939.B0.13



mm 3,3

2936.B0.12



mm 4

2939.B0.04



mm 4

2939.B0.14

mm 3

2936.B0.01




mm 4

2936.B0.13




Osteotomi
Osteotomes
Ostéotomes
Osteotomos

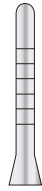

mm 2,5

2937.B0.02

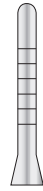


mm 2,5

2937.B0.12




mm 2,8

2937.B0.53

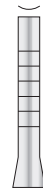

mm 2,8

2937.B0.63

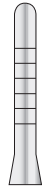


mm 2,8

2937.B0.03




mm 2,8

2937.B0.13

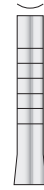

mm 3,5

2937.B0.55

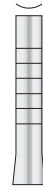

mm 3,5


2937.B0.65



mm 2,2

2937.B0.01


mm 6
mm 10
mm 16

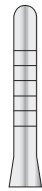

mm 3,1

2937.B0.04

mm 6
mm 10
mm 16

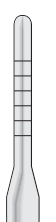

mm 3,1


2937.B0.14



mm 2,2

2937.B0.51


mm 6
mm 10
mm 16

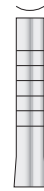

mm 3,8


2937.B0.56

mm 6
mm 10
mm 16

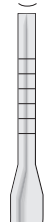


mm 3,8

2937.B0.66

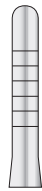

mm 3,5

2937.B0.05

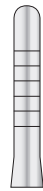

mm 3,5

2937.B0.15




mm 4,1

2937.B0.57




mm 4,1

2937.B0.67

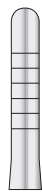

mm 3,8

2937.B0.06

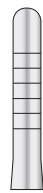

mm 3,8

2937.B0.16




mm 3,5

2937.B0.55




mm 3,5

2937.B0.65

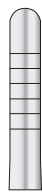

mm 4,1

2937.B0.07

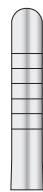

mm 4,1

2937.B0.17

Divaricatori d'osso


Bone spreaders

Ecarteurs de l'os

Expansor de hueso

29

8

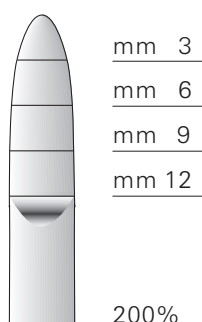


mm 2,2

2940.B0.01



mm 2,8

2940.B0.02

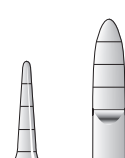


mm 2,2

2940.B0.11



mm 2,8

2940.B0.12

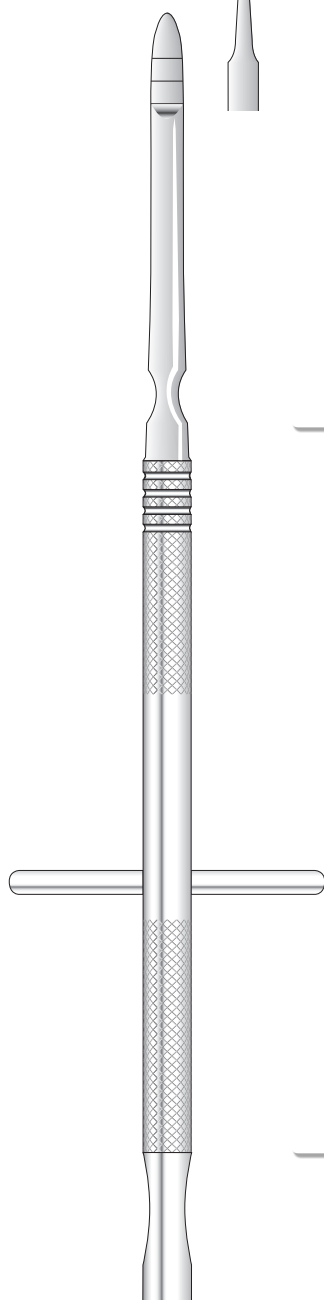


mm 3,4

2940.B0.03



mm 4

2940.B0.04

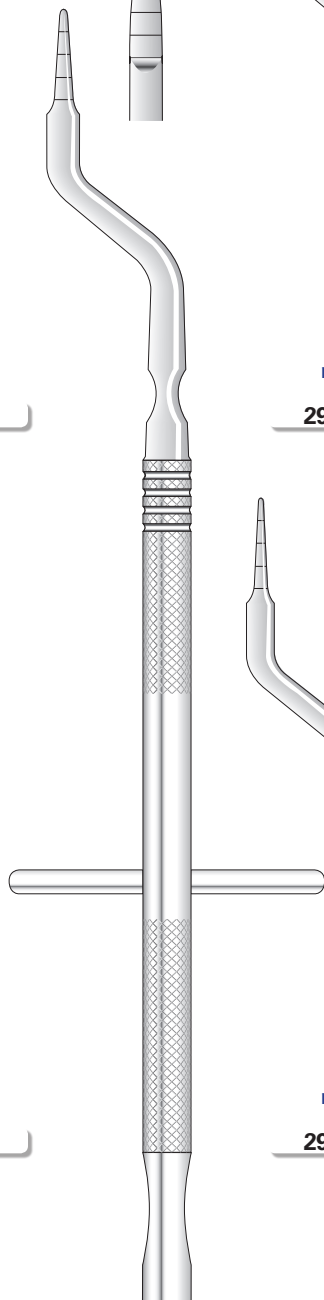

mm 3,4


2940.B0.13



mm 4

2940.B0.14

Frese carotatici Trepine
Trepine burs
Fraises à carotter Trepine
Fresas Trepine

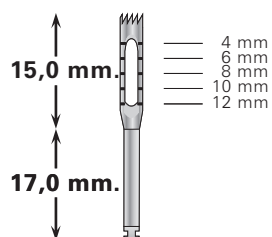

est.3,0 mm.
int.2,5 mm.



2982.Y0.25

est.3,5 mm.
int.3,0 mm.



2982.Y0.30

est.4,0 mm.
int.3,5 mm.



2982.Y0.35

est.4,5 mm.
int.4,0 mm.



2982.Y0.40

est.5,0 mm.
int.4,5 mm.



2982.Y0.45

est.6,0 mm.
int.5,0 mm.




2982.Y0.50

est.7,0 mm.
int.6,0 mm.




2982.Y0.60

est.8,0 mm.
int.7,0 mm.

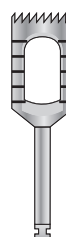


2982.Y0.70

est.8,5 mm.
int.7,5 mm.

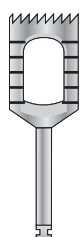


2982.Y0.75

est.9,0 mm.
int.8,0 mm.

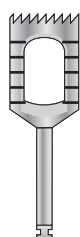


2982.Y0.80

est.10 mm.
int.9,0 mm.

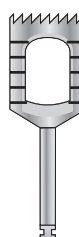

2982.Y0.90

est.11 mm.
int.10 mm.

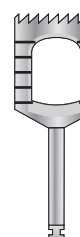

2982.Y0.100

Frese carotatici Trephine


Trephine burs

Fraises à carotter Trephine

Fresas Trephine

29

10

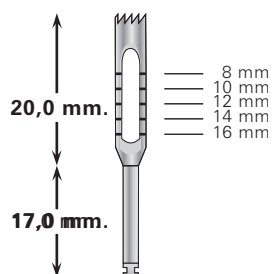

est.4,0 mm.
int.3,5 mm.



2983.Y0.35

est.4,5 mm.
int.4,0 mm.



2983.Y0.40

est.5,0 mm.
int.4,5 mm.



2983.Y0.45

est.6,0 mm.
int.5,0 mm.



2983.Y0.50

2983.Y0.60


2983.Y0.70

2983.Y0.92

est.7,0 mm.
int.6,0 mm.

est.8,0 mm.
int.7,0 mm.

est.10 mm.
int.9,2 mm.

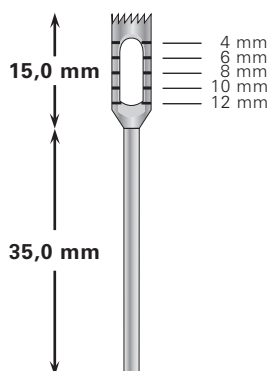

est.5,0 mm.
int.4,0 mm.




2985.Y0.40

est.7,0 mm.
int.6,0 mm.




2985.Y0.60

est.11 mm.
int.10 mm.

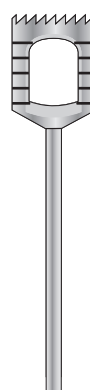

2985.Y0.100

Frese per manipolo

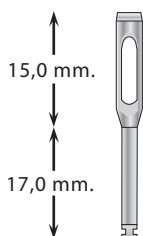

est.3,5 mm.
int.3,0 mm.



2984.Y0.30

est.5,0 mm.
int.4,5 mm.



2984.Y0.35

est.4,0 mm.
int.3,5 mm.



est.6,0 mm.
int.5,0 mm.



2984.Y0.45

est.4,5 mm.
int.4,0 mm.



2984.Y0.50

est.7,0 mm.
int.6,0 mm.



2984.Y0.60

Mucotomi

Mucotomes



29

11



2950.G0.01

DT08

2950.G0.02

DT08

Strumenti per la compattazione dell'osso
Bone compactors
Compacteurs d'os
Compactadores para hueso



2955.Y0.10

Macinatori di osso autologo
Grinders for autogenous bone
Moulin à os autologue
Instrumentos para moler el hueso autógeno



2956.Z0.01



2960.Y 0.01



Bacinella per osso
Basins for bone
Cuvette pour os
Caja de mezcla



2967.Y0.01



2967.Y0.02

Osteometro
Thickness gauges for bone
Épaisseur à os
Osteometro



2964.Y0.01



2966.Y0.01



2965.Y0.01



2979.Y0.01



2978.Y0.15



2978.Y0.19



mm 2,5
2970.Y0.01



mm 4,4
2970.Y0.02



2997.Y0.01

Iniettori d'osso
Bone injectors
Injecteurs d'os
Inyector para hueso



2998.Y0.01



2975.Y0.02

Raschiatore d'osso
Bone scraper
Grattoir à os
Rallador para hueso



2993.Y0.15



Mead

2995.Y0.01

Martello chirurgico
con inserti in teflon intercambiabili
Surgical hammers with interchangeable
teflon heads
Maillets chirurgicaux avec têtes en Téflon
interchangeables
Martillo para cirugía con insertos en teflon
intercambiables



2995.Y0.05



2996.Z0.26

Scalpelli graduati

Gli scalpelli graduati servono per allargare le creste alveolari particolarmente strette, anche senza il preventivo utilizzo di frese. Le lame sono graduate per indicare la profondità, e possono essere dritte o incurvate.

Graduated chisels

These chisels are used to widen particular narrow alveolar ridges, without using cutters previously. Blades have reference graduation marks and can be straight or curved.

Cinceles graduados

Útiles para ensanchar las crestas alveolares particularmente estrechas, sin emplear las fresas. Las hojas están graduadas para indicar la profundidad, y pueden ser derechas o curvas.

Scalpelli Freer

Gli scalpelli Freer hanno punte estremamente taglienti per incidere ed allargare le creste alveolari. Sono disponibili sia con taglio singolo sia con taglio doppio.

Freer Chisels

Freer chisels have extremely sharp tips to cut and widen alveolar ridges. They are available with one side or both sides cutting edge.

Cinceles Freer

Los cinceles Freer tienen puntas extremadamente cortantes para incidir y ensanchar las crestas alveolares. Estos cinceles pueden tener un solo lado cortante o ambos los lados.

Osteotomi

Appositamente realizzati per l'espansione progressiva, in senso circonferenziale, del sito implantare nelle creste alveolari di spessore sottile.

Osteotomes

Specially designed for progressive, circumferential expansion of the implant bed in thin alveolar ridges.

Osteotomos

Hechos expresamente para la expansión progresiva del lugar de implantación en las crestas alveolares delgadas.

Osteotomi progressivi

Vengono utilizzati per preparare il sito implantare nelle regioni mascellari con osso di qualità 3 o 4. La figura n° 1 è utilizzata in sostituzione della fresa spirale; la n° 2 per iniziare l'espansione della cresta mediante compressione dell'osso tenero. Le figure 3 - 4 - 5 servono per ottenere un sito di diametro leggermente inferiore rispetto all'impianto da posizionare. La figura n° 6 si usa per creare rialzi di seno o per fratturare la cresta, in vista di un posizionamento successivo dell'impianto.

Progressive osteotomes

Used to prepare the implant site in the maxillary areas with bone densities 3 or 4. Figure n.1 is used instead of spiral bur; n.2 to begin expansion of the ridge by compression of the soft bone. Figures 3, 4 and 5 are used to form a site whose diameter is slightly less than that of the implant to be inserted. Figure n.6 is used in case of lifting of the maxillary sinus or to break the ridge for subsequent insertion of the implant.

Osteotomes progresivos

Utilizados para preparar el lugar de implantación en las áreas maxilares con hueso de clase 3 o 4. La figura n° 1 está utilizada en sustitución de la fresa espiral, la n° 2 para empezar la expansión de la cresta alveolar por medio de la compresión del hueso blando. Las figuras 3, 4 y 5 están utilizadas para formar un lugar poco más inferior de la instalación que debe ser introducida. La figura n° 6 está utilizada para empujar el seno o para fracturar la cresta alveolar, para introducir siguientemente la instalación.

Osteotomi con stop

Gli osteotomi concavi frantumano il pavimento del seno mascellare attraverso la cavità implantare preparata sotto il pavimento stesso. Gli osteotomi convessi rialzano il pavimento del seno mascellare precedentemente fratturato. Disponibili nel modello dritto o curvo.

Osteotomes with stop

Concave osteotomes break the floor of the maxillary sinus through the implant cavity prepared beneath the floor. Convex osteotomes raise the floor of the maxillary sinus previously broken. Available in straight or curved pattern.

Osteotomos con stop

Los osteotomos concavos trituran el pavimento del seno a través la cavidad de implantación preparada debajo del pavimento. Los osteotomos concavo levantan el pavimento del seno triturado. Disponibles en los modelos derechos o curvos.



Frese carotatrici trephine

Consentono di eseguire prelievi ossei autologhi mediante strumenti rotanti. Sono adatte inoltre alla rimozione di impianti. Disponibili con tacche di profondità.

Trephine burs

Designed to perform autogenous bone removal using rotary instruments. Also suitable for removal of implants. Available with depth indicators.

Fresas trephine

Útiles para sacar partes de huesos por medio de instrumentos rotantes. Estas fresas están útiles también para quitar implantes y están disponibles con indicadores de profundidad.

Macinatori di osso autologo

Realizzato interamente in acciaio inossidabile, smontabile in più parti per una perfetta pulizia e sterilizzazione. La dimensione delle particelle è determinata dalla pressione esercitata durante la fase di macinazione.

Grinders for autogenous bone

Entirely made of stainless steel, these instruments can be dismantled for perfect cleaning and sterilization. The dimensions of the bone particles depends on the pressure exerted during the grinding phase.

Instrumentos para moler el hueso autógeno

En acero inoxidable, estos instrumentos pueden ser desmontados para una perfecta limpieza y esterilización. Las dimensiones de las partículas del hueso dependen de la presión ejercitada durante la fase de la molienda.

Osteotometro

Permette di misurare lo spessore osseo della cresta alveolare. Un particolare dispositivo consente di mantenere visualizzata l'ultima misurazione presa.

Thickness gauges for bone

Used to measure the thickness of bone in the alvear ridge. A special device makes it possible to maintain the last measurement.

Osteometro

Permite de medir el espesor óseo de la cresta alveolar. Un dispositivo particular permite de mantener visualizada la última medida tomada.

Iniettori di osso

Consentono l'inserimento, mediante iniezione nelle sedi d'innesto, di osso precedentemente macinato e preparato.

Bone injectors

Used to inject ground and prepared bone particles into the implant site.

Inyector para hueso

Para inyectar el hueso triturado y preparado antes en el lugar de implantación.

Bacinelle per osso

Contenitori lucidi sterilizzabili, utilizzati per la preparazione della miscela ossea da iniettare.

Basins for bone

Polished containers used to prepare the bone mixture to be injected.

Cajas de mezcla

Recipientes brillante para preparar la mezcla ósea da inyetar.

Compattatori

Utilizzati per compattare osso o altro materiale da riempimento.

Compactors

Used to compact bone or other filling materials.

Compactadores

Para compactar el hueso o otros materiales para llenar.



Dentag

